


SENSICA

Guide Rapide

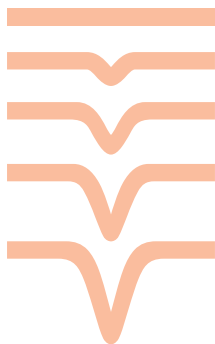

Sensilift

La lecture complète du guide d'utilisateur est un préalable important à l'utilisation du dispositif Sensilift.

WWW.SENSICA.COM

Bien Commencer

Avec Sensilift

Si vous lisez ceci, c'est que vous avez décidé de prendre votre beauté en vos propres mains. C'est à présent à vous de dire quand, de dire où et de dire à quel point !

Il est bien évidemment légitime de vouloir améliorer ce que vous voyez dans le miroir - la technologie Sensica bonifie ce que la nature vous a donné, parce que Sensica et la nature vont bien ensemble !

C'est un plaisir vous rencontrer

En premier lieu et avant toute chose, merci de ce vote de confiance. Vous avez pris la bonne décision en choisissant Sensica pour prendre soin de votre visage. Chez Sensica, nous sommes portés par des années d'expérience et une connaissance approfondie dans le domaine de l'esthétique médicale professionnelle. S'il fallait une preuve, sachez que

ces dispositifs à utiliser chez soi sont conçus et créés en utilisant les mêmes technologies que celles en usage dans les cliniques et qu'ils sont conçus par les mêmes ingénieurs. Nos dispositifs sont cliniquement testés et agréés par la FDA américaine, ils ne sont donc pas uniquement efficace, ils sont également sûrs.

Sensica et Nature - Le Bon Accord

Nous sommes tous pour la nature et naturels. Il n'y a pas des 'rides', il y a les sillons du sourires; il n'y a pas de 'peau relâchée', il y a la peau mature... Peu importe! Les faits sont là, même si vous aimez ce que la nature vous a donné, elle ne vous a pas dit que 35, 40, 50 ans plus tard, elle n'aurait pas besoin d'un peu

d'aide - c'est ce que vous lui apporterez dans un instant...

Ce que nous faisons, c'est d'aider les processus naturels du corps. Votre dispositif affermissant stimule la formation de collagène dans la peau, pour l'affermir, la fortifier et la tendre - comme le fait la nature... à 20 ans.

Commençons

1. 48 heures avant de débiter votre premier soin, réalisez un essai préliminaire sur chacune des zones sur lesquelles vous avez l'intention de l'appliquer.
2. Branchez le dispositif à une prise électrique. Vous devriez voir l'Indicateur de Statuts clignoter en jaune.
3. Veillez à ce que votre peau soit propre et sèche, exempte de toute crème ou maquillage.
4. Appliquez uniformément une fine couche du Gel Base sur la zone où vous avez l'intention d'appliquer le soin.
5. Réglez le niveau d'énergie en appuyant sur le bouton RF (voir ci-dessous), autant de fois que nécessaire pour atteindre le niveau souhaité : 1, 2, ou 3.
6. Appuyez sur le bouton Massage (voir ci-dessous) pour régler le niveau de massage souhaité : 1 ou 2.

Bouton RF - 🌀 Bouton Massage - 🤲

Bonjour ! Je suis Consultante Beauté chez Sensica, ici pour vous aider en vous donnant quelques astuces supplémentaires...

Pas d'impatience. Débutez toujours au niveau 1 et trouvez votre voie. Cela vous donnera confiance et assurera votre confort.

La fonction massage est entièrement conçue pour atteindre les couches profondes de la peau - c'est ce qui rend le dispositif si efficace.

Votre dispositif est à présent prêt à être utilisé

1. Placez les électrodes RF (doigts de massage) bien en contact avec la peau.
2. Vous devriez voir le témoin vert fixe dès qu'il y a contact complet avec la peau.
3. Déplacez le dispositif sur chacune des zones de soin (comme expliqué au chapitre 04) en mouvements circulaires durant 5 minutes (10 minutes pour le front).
4. Le traitement va produire une sensation de chaleur au niveau de votre peau.
5. Essuyez tout résidu de Gel Base de la zone traitée. Pour accroître les résultats, appliquez la crème Sensica 'Age Defying' (également disponible sur www.sensica.com).

Et c'est tout ! Vous sentirez votre peau tendue, plus douce et plus ferme. Profitez-en.

Vous pouvez utiliser un miroir lors de l'application du soin pour garder un œil sur le témoin.

Ne vous laissez pas tenter par l'application d'un soin sur la totalité du visage en une fois - tenez-vous en à des zones de la taille d'une carte de crédit.

Le mécanisme de sécurité dans le dispositif régule le niveau d'énergie RF pour convenir à la température de votre peau, ne vous inquiétez donc pas de sentir la chaleur apparaître et disparaître durant le soin.

Optimisation des résultats

1. Les résultats du traitement Sensilift peuvent être différents d'un individu à l'autre, selon des facteurs environnementaux et biologiques, l'hérédité et l'âge.
2. Le dispositif ne délivre l'énergie RF que lorsque le témoin vert est fixe. Si, après quelques secondes cela ne se produit pas, essayez de procéder ainsi :
 - veillez à avoir sélectionné un niveau RF.
 - veillez à ce que les électrodes RF (doigts de massage) soient bien en contact avec la peau.
 - veillez à avoir appliqué suffisamment de Gel Base lequel est nécessaire au bon contact.
3. Si durant le traitement vous ne ressentez aucune chaleur sur la zone de soin:
 - veillez à ce que l'indicateur de statuts ait pris la forme d'une lumière verte fixe.
 - augmentez le niveau RF.
 - réduisez la surface de la zone de soin et le rayon des mouvements circulaires.
4. Pour une utilisation appropriée et une meilleure compréhension de votre dispositif Sensilift, lisez "Indicateurs de statuts" (chapitre 07 ci-dessous).

Le remodelage et le changement dans la production de collagène peuvent prendre du temps. Soyez patient et vous verrez des résultats d'ici 8 soins. Pour conserver des résultats optimaux sur le long terme, vous pouvez répéter le protocole de soin Sensilift autant que nécessaire.


Oh... Encore une chose, ne vous inquiétez pas si votre peau est rouge pâle ou rose - durant ou après le soin, cela veut dire que ça marche ...

Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions concernant votre peau ou le traitement à : sensicabeautyconsultant@Sensiea.com

04

Zones de soin:

- Pattes d'oie (1)
- Joues & contour de la bouche (2)
- Menton & Mâchoire (3)
- Front (4)
- Cou (5)
- Décolleté & Mains

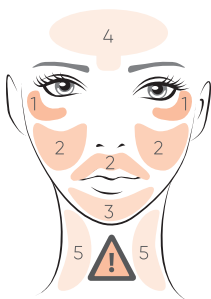


Faites en sorte d'accorder 5 minutes entières à chaque soin, avec le témoin vert fixe tout le long du traitement.

Lors de l'application du soin sur la mâchoire, conservez un déplacement du dispositif allant d'un côté à l'autre de celle-ci.

⚠ Mise en garde:

Évitez de traiter le tiers inférieur du cou, la thyroïde, les cavités oculaires, le nombril et les lèvres.

05

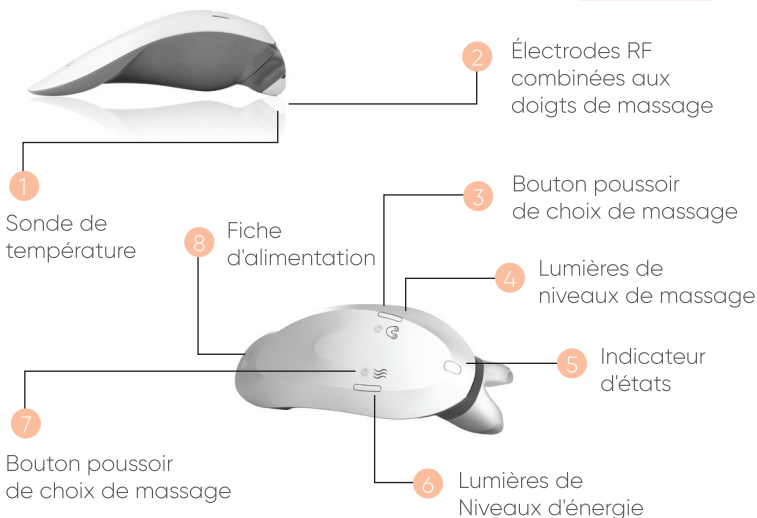

Indicateurs de statuts

Lumière jaune clignotante

Sensilift est en mode **veille**.
Lorsqu'aucune lumière ne s'allume, il s'agit le plus souvent d'un branchement incorrect du cordon d'alimentation.

Témoin vert fixe

Sensilift est en mode **soin**. La technologie RF est activée, le contact avec la peau détecté et le soin en cours.

Alternance de lumières clignotantes vertes et jaunes

Sensilift est en mode **erreur**. Le dispositif détecte un dysfonctionnement et prévient l'activation des fonctions RF et massages.



Énergie RF
Sélecteur de niveau
Bouton tactile

Témoins niveau d'énergie 1-3

La lumière verte allumée indique le niveau d'énergie RF. Appuyez successivement sur le Bouton de choix de niveau d'énergie RF pour atteindre le niveau choisi : 1, 2, 3 ou Arrêt.



Massage
Sélecteur de niveau
Bouton tactile

Témoins niveau de vitesse 1-2

La lumière verte allumée indique le niveau du masseur. Appuyez successivement sur le Bouton de choix de niveau de massage pour atteindre le niveau choisi : 1, 2 ou Arrêt.